




ПОЛИТЭН ЛАБ

ШДР-60.50.105

Шкаф для хранения реактивов низкий

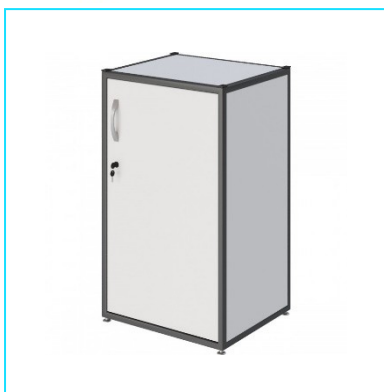

Ни одна лаборатория не обходится без химических реактивов. Для хранения агрессивных веществ необходимы специальные шкафы, которые позволяют обеспечить требуемые условия и возможность подключения дополнительной вентиляции.

Шкаф в своей основе имеет металлокаркас, который придает дополнительную надежность всей конструкции.

Конструкция рассчитана на многолетнюю эксплуатацию, поэтому не содержит алюминиевых и пластиковых деталей.

5 лет честных гарантийных обязательств.

Описание

- Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм.
- Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
- Шкаф оснащен металлическими опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
- Для подключения к вытяжной вентиляции в верхней части шкафа имеется патрубок диаметром 100 мм.
- Конструкция шкафа обеспечивает формирование вентиляционного потока для удаления паров реактивов из всего внутреннего объема.
- Две металлические полки, три секции.
- Дверь выполнена из листового металла толщиной 1 мм.
- Дверь оснащена замком.
- Дверные петли расположены вне зоны хранения.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 600×500×1050 |
| Масса, кг | 38 |
| Диаметр вытяжного патрубка, мм | 100 |

ООО «Политэн»

www.politenlab.ru | mebel@politenlab.ru | (3822) 93-44-66, (913) 810-40-08